




艾德姆Core系列是一款经济实惠，操作简单的便携式天平。简单按键设计配以背光显示屏使得操作更简便。磨砂设计的ABS外壳更适用于耐压和实验室环境，易于清洗且耐用。ShockProtect™ 过载保护使得Core系列能承受过载而不受损害。可拆卸防风罩，AC电源，内置安全锁孔等一系列特征使得Core系列随时准备，随同您进行户外工作。艾德姆40年的天平制造经验，始终立志于为用户提供多用途，高性能的高质量产品，为您打造快速，准确，物超所值的完美典范。

最耐用小巧的天平

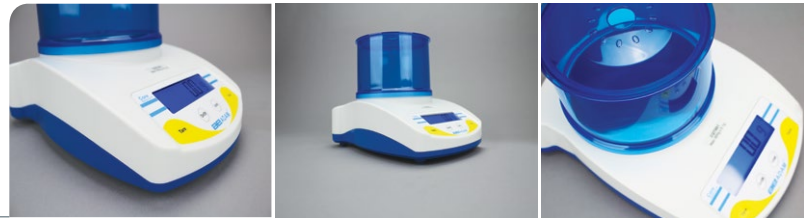

功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见
- 可调节的背光灯可以设置为“始终开启”，“关闭”或“称重时开启”
- 可进行叠加存储，节省更多空间（仅限120mm秤盘）
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮
- 左右去皮键满足不同的使用习惯
- 下装金仕顿锁孔以防止天平被盗
- 304不锈钢大秤盘方便清洁
- 坚固耐用的结构可用于工业用途
- 三级 ShockProtect®防过载保护保护天平内部组件
- 下方称重挂钩
- 自动关机系统更能有效的节省电源
- 当过载称重时会有声音过载报告警告
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数
- 使用AC适配器（包括）或电池（不包括）

应用程序

- 称重

关于艾德姆

在过去的四十多年了，艾德姆提供了各种规格性能可靠和高性价比的称量仪器，赢得了全世界范围的专业人士的信赖。艾德姆的产品真正实现：快速，稳定和物超所作的天平。

型号	CQT 202	CQT 251	CQT 601	CQT 1501	CQT 2000	CQT 2601	CQT 5000
量程	200g	250g	600g	1500g	2000g	2600g	5000g
精度	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	0.1g	1g
重复性 (S.D.)	0.02g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	0.1g	1g
线性误差	0.02g	0.1g	0.1g	0.2g	1g	0.2g	1g
称盘大小	120mm ø				145mm ø		
称量单位	g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tl.T						
稳定的时间 (秒)	2						
校准	外部校准						
显示	背光LCD与18mm高位数						
电源	12VAC 150毫安适配器 / 6节AA电池						
工作温度	0° 到 40°C						
外壳	ABS塑料						
防风罩尺寸	圆形 130mm ø x 90mm				无		
整体尺寸	171x250x80mm (宽x深x高)						
净重量	0.9kg						

配件

物料编号.....	说明
308002042.....	手提箱
308232033.....	防护罩
308232036.....	防护罩 (5个)
308232037.....	防护罩 (10个)
700100046.....	安全锁
700660290.....	检定证书
700100035.....	M1 1g - 100g 校准砝码组
700100071.....	M1 1g - 2kg 校准砝码组
700100072.....	M1 200g 校准码
700100060.....	M1 500g 校准码
700100029.....	M1 1kg 校准码
700100030.....	M1 2kg 校准码
700100012.....	F1 200g 校准码

精選 配件



安全锁

安全锁和电缆将嵌入式锁固定在天平和电子称上，且电缆能在天平周围绕成圈将天平安全地锁定在合适的位置上。电缆是柔性钢丝制成，不易被切断，用户可以在密码锁上设定一组数字密码来提高安全性能。



防护罩

防湿罩使天平易于清洁并保护天平。



手提箱

手提箱结构坚固，用不锈钢包边角，箱内有软泡沫缓冲垫来保护天平或电子称。还有一个保护肩带来锁定手提箱。

由提供